

國立中興大學獸醫學院動物疾病診斷中心

伴侶動物微生物學檢驗檢體送件須知


1. 請填妥伴侶動物微生物學掛號單資料，註明檢體種類並勾選檢測項目。
2. 微生物學檢驗樣本可為犬、貓、兔、鼠、鳥、烏龜及其他伴侶動物檢體。樣本請以冷藏方式於48小時內送達，新鮮抽取檢體可立即於1小時內室溫遞送。

◎厭氧培養建議：針抽物先打半量進厭氧血瓶，剩餘檢體置於針筒內冷藏，拭子以厭氧管運送。

◎尿液檢體一律以菌數定量檢驗，勿濃縮或增菌（如血瓶培養），並以針筒冷藏保存。

檢體於收件日起冷藏保留7日後廢棄，如需領回請於七日內至診中703室領取。

3. 檢驗結果視細菌培養結果及後續進程而定（如下圖）：

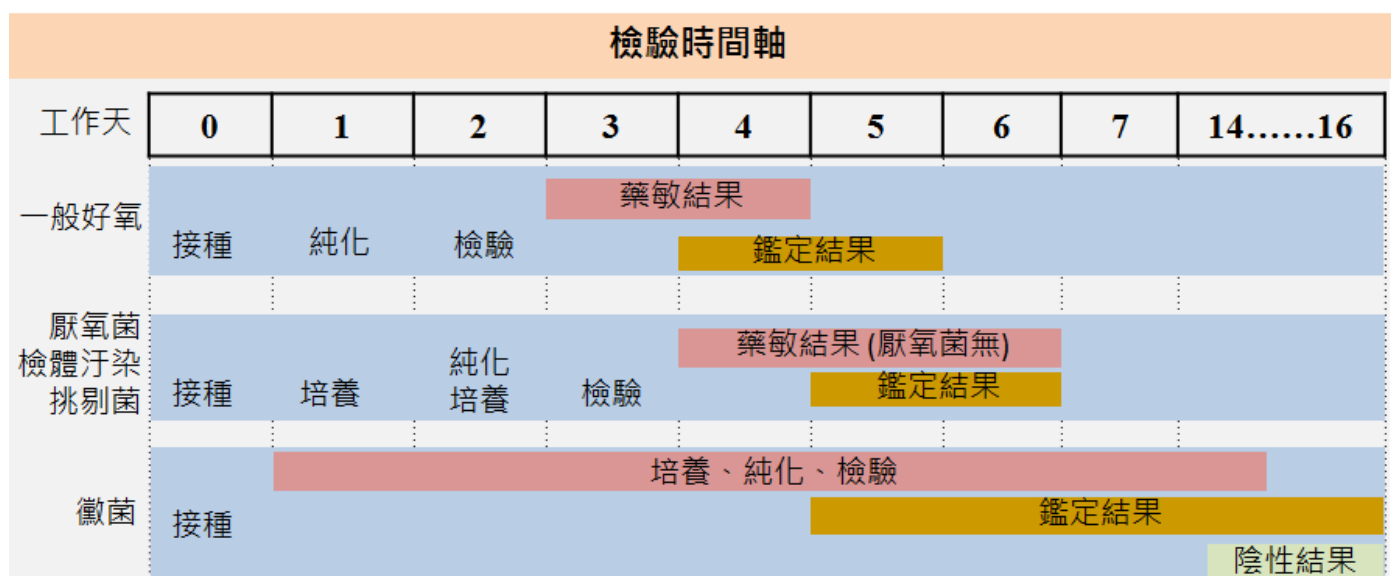

4. 現場掛號：於中興大學動物疾病診斷中心掛號（102室）遞送檢體。
5. 郵政掛號：檢體可利用快捷或宅急便（包裹良好，寄至「40227 臺中市南區興大路145號國立中興大學獸醫學院-動物疾病診斷中心703室」。
- 6 聯絡電話：

中心辦公室 04-22840894~5 轉 112 楊小姐或轉 122 許小姐

檢驗室 04-22840894~5 轉 703 吳迎晨先生